


# 介護の腰痛対策に最適！

てこの原理で  
80kgでも5kg以下に

## リフティ・ピーヴォ

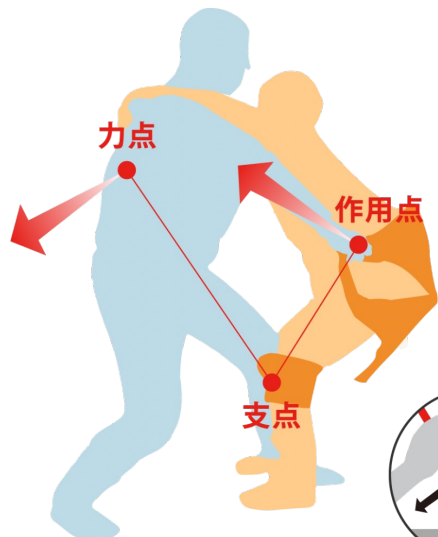

ベッドからの  
移乗方法

車いすからの  
移乗方法



①車椅子にリフティ  
(座面) をセット



②相手の膝にピーヴォ  
(膝ベルト) を巻く



③相手を端座位の状態  
にして、相手の両足を  
床に着ける



④自分の膝をピーヴォに押し  
当てる。相手の両脇の下に  
自分の手を入れて後ろに引く



⑤相手のお尻が浮くので、  
回転して移乗



①相手 (介護される方)  
の両足を床に着ける。  
相手の膝にピーヴォ  
(膝ベルト) を巻いて  
自分(介護者) の膝を  
ピーヴォに押し当てる



②相手を前傾姿勢



③自分がリフティの  
持ち手を持って、  
両手を伸ばして  
後ろに引く

④相手のお尻が浮くので、  
回転して移乗

使い方動画と  
説明はこちら➡



# 拘縮があり反った相手への使用

↓この時、別の人が相手の背中を軽く押すと軽くなります。



リフティを背中に差し込みます



ピーヴォに自分の膝を押し当て脇の下からリフティの持ち手をつかみます




重心を自分の後ろ側の足に移します。自分の体を後ろに引きながら、リフティの持ち手を引っ張ります。

## 乗用車への移乗介助

(昇降できないベッドなど車椅子よりも高い場所に着座させる時にも使えます)

### 乗車時

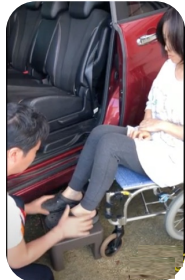

台の上に相手の両足を乗せる



相手の膝にピーヴォを巻く。台の上で自分の片足をピーヴォに押し当てる



相手の両脇の下に自分の手を入れて後ろに引く



回転して相手のお尻を座席に乗せる

### 降車時



台の上に相手の両足を乗せる



相手の両脇の下に自分の手を入れて後ろに引く。回転して車いすに座る

## 介護保険適用について

介護保険適用（貸与）：リフティピーヴォ  
福祉用具貸与 特殊寝台付属品 簡易リフト  
TAISコード：  
01652-000005（デニム生地：インディゴ）  
01652-000006（帆布生地：レッド、オレンジ、ホワイト）



（貸与）特殊寝台付属品 入浴補助用具

介護保険適用（販売）：リフティタタミ  
特定福祉用具購入 入浴補助用具 簡易リフト  
01652-000007（防水畳：グリーン）

## ご使用の判断

• 相手は両足がある  
• ひざや足の骨は脆くない  
• 著しい尖足等の変形がなく足裏が床につく

No → 使用不可

Yes

• 相手の体重は自分の2倍以下  
• 相手の身長は自分より30cm以上大きくない

No → 使用不可

Yes

相手は前傾になれる

No

Yes



座位を保てない相手は腹部にクッションを挟んでも良い



軽い相手は大きく前傾にしないで使える



自分と同等の体重なら上げられる  
トランスファーボードと組み合わせても良い

製造元 株式会社エナジーフロント

〒701-0212 岡山県岡山市南区内尾394-28  
TEL: 086-250-6432 FAX: 086-250-6232  
URL: <https://www.aun.blue>  
E-mail: [info@energyfront.jp](mailto:info@energyfront.jp)