

拘縮があり反った相手への使用

↓この時、別の人が相手の背中を軽く押すと軽くなります。



リフティを背中に差し込みます




ピーヴォに自分の膝を押し当て脇の下からリフティの持ち手をつかみます



重心を自分の後ろ側の足に移します。自分の体を後ろに引きながら、リフティの持ち手を引っ張ります。

乗用車への移乗介助

(昇降できないベッドなど車椅子よりも高い場所に着座させる時にも使えます)

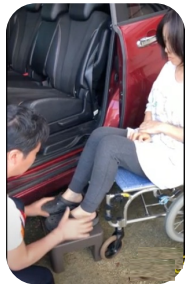

台の上に相手の両足を乗せる



相手の膝にピーヴォを巻く。台の上で自分の片足をピーヴォに押し当てる



相手の両脇の下に自分の手を入れて後ろに引く



回転して相手のお尻を座席に乗せる



台の上に相手の両足を乗せる



相手の両脇の下に自分の手を入れて後ろに引く。回転して車いすに座る

乗車時

降車時

介護保険適用について

介護保険適用（貸与）：リフティピーヴォ
福祉用具貸与 特殊寝台付属品 簡易リフト
TAISコード：
01652-000005（デニム生地：インディゴ）
01652-000006（帆布生地：レッド、オレンジ、ホワイト）




（貸与）特殊寝台付属品

入浴補助用具

介護保険適用（販売）：リフティタミ
特定福祉用具購入 入浴補助用具 簡易リフト
01652-000007（防水量：グリーン）

ご使用の判断

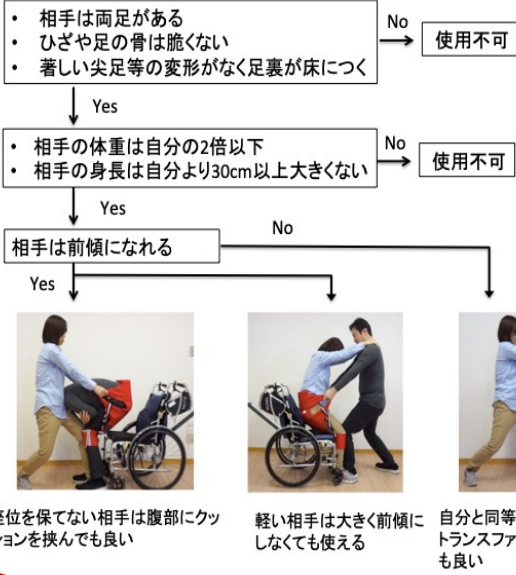

製造元 株式会社エナジーフロント
〒701-0212 岡山県岡山市南区内尾394-28
TEL: 086-250-6432 FAX: 086-250-6232
URL: <https://www.aun.blue>
E-mail: info@energyfront.jp