


滑りやすい入浴時に最適!

移乗介助の **腰痛対策**に

リフティタタミ(入浴用介助ベルト)

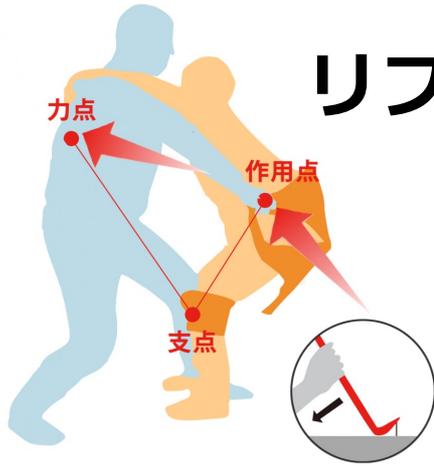

希望小売価格 ¥38,500 (税込)

てこの原理で
80kgでも5kg以下に

座面



膝ベルト



電源不要で
災害時も
活躍

基本の使い方

使い方動画
はこちら➡ 

ご使用の判断



①相手(介護される方)の両足を床に着ける。相手の膝に膝ベルトを巻いて自分(介護者)の膝を押し当てる



②相手を前傾姿勢



③前傾になれる方




④持ち手を持って、両手を伸ばし後ろに引く。相手のお尻が浮くので、回転して移乗

腰は高く
落とさない



もう1人が背中を軽くサポートすると安全に軽く上がります

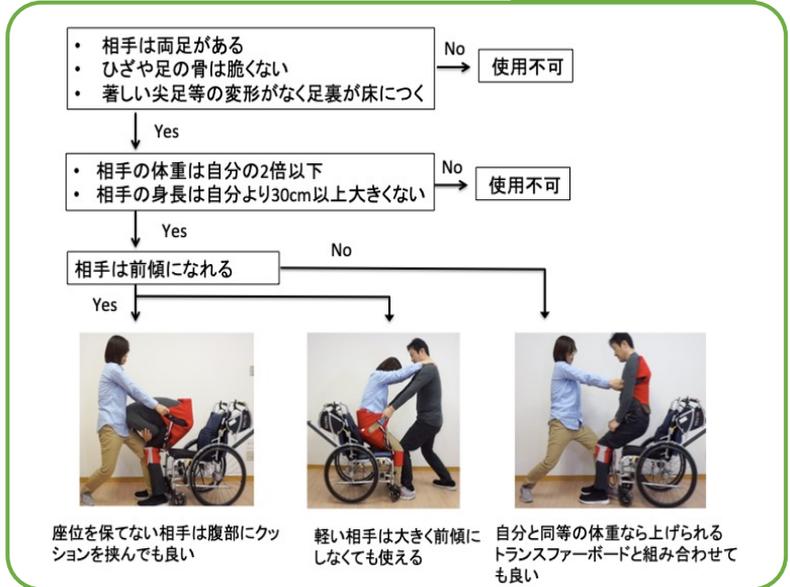

③拘縮があり反った方

反った方は背中に座面を入れます




介護保険適用（販売/入浴補助用具）:リフティタタミ(入浴用介助ベルト)

特定福祉用具購入 入浴補助用具 簡易リフト
01652-000007 (防水畳: グリーン)

リフティ・ピーヴォの完全防水タイプ

濡れない畳で作りました。

【ご使用方法】リフティピーヴォと同じです。

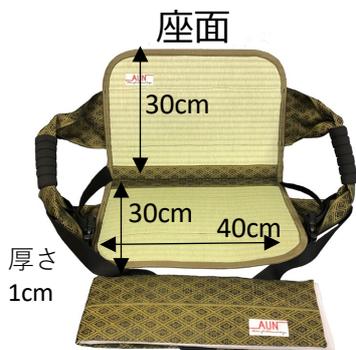

希望小売価格
¥38,500(税込)

使い方動画
はこちら↓



【素材】座面:ポリプロピレン、ソフトボード、ポリエチレン
その他:ポリエステル100%、プラスチックバックル
【お手入れ】座面は洗濯機不可。手洗いのみ。日陰干し
【総重量】700g 【耐荷重】100kg

使える非介助者の要件:

足に体重がかかっても大丈夫な方。

尖足や骨が脆い方は対象外。骨格に異常がなければ全麻痺でも可

ベッドからの移乗方法



事前に座面のみを車イスに
セットして置きます。
相手の腕をまとめます。



相手の膝を立て、膝ベルトを
巻きます。



相手を引き起こして
端座位にします。



相手の両足を地面に
つけましょう。



自分の膝を膝ベルトに押し当
て、相手の脇を持ちます。

腰は高く
落とさない



自分の後方上側に向かって大きく反るよ
うに引きましょう。相手の頭が膝より
手前に来た時にお尻が上がります。
回転し車イスに座らせます。膝ベルトの
黒色の紐を座面の持ち手に通してバック
ルで止めます。
この後は表面の基本の使い方に移乗しま
しょう。

製造元 株式会社エナジーフロント
〒701-0212 岡山県岡山市南区内尾394-28
TEL: 086-250-6432 FAX: 086-250-6232
URL: https://www.aun.blue
E-mail: info@energyfront.jp

Facebook

