

歩きたい気持ちを応援! 骨粗鬆症の方にもお勧め



若見え&快適で骨折予防になる

「プラスパッド ジーンズ」

トレパンのような柔らかさのストレッチジーンズ
着用後にパッドは体温で柔らかくなり、パッドの存在を
忘れる履き心地です。

大腿骨近位部の骨折リスクを軽減する衝撃吸収パッド




● 大腿骨近位部骨折が寝たきりの原因に
足の付け根にある大腿骨近位部。高齢者の転倒時にこの部分を骨折することが多く、大腿骨近位部を破損すると、歩行が困難となり、その結果、寝たきりの状態を招きます。



● 衝撃吸収パッド

(株)カネカと芝浦工業大学の共同開発による衝撃吸収パッドを採用。体温で適度な柔らかさを保ち、違和感がなく、様々な転倒パターンに対応した設計となっています。なお、臨床実験により、衝撃吸収パッドを装着すると大腿骨近位部の骨折リスクが19~60%減少^{*}することが確認されています。

ご注意:本品は骨折予防を保证するものではありません。
* 原田敦、ヒッププロテクターの効用-臨床試験による検討-
生活生命支援医療福祉工学学会連合大会2011講演論文集

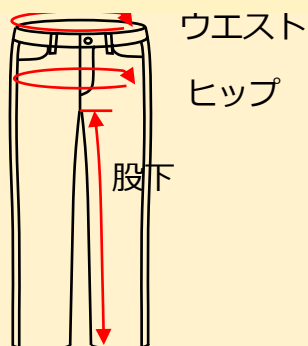

サイズ表 (男女兼用)

サイズ	ウエスト	ヒップ	股下
LL	95~113	114	69
L	90~108	108	68
M	84~100	105	68
S	80~90	100	65
SS	68~80	98	63

【特徴】・衝撃吸収パッド装着ストレッチジーンズ
・ウエスト総ゴム入り。

【生地】ストレッチジーンズ素材
(表地) 綿63%, ポリエステル35%, ポリエチレン2%
(裏地) ポリエステル65%, 綿35%


【パッド】イソブチレン系熱可塑性エラストマー

【洗濯】・パッドを取り外して洗濯してください。
・ジーンズは色落ちしますので他のものと分けて洗濯してください。

(衝撃吸収パッドの装着方法)

パッドは上下の向きがあります。最も大きな孔を上側にしてズボンの内側のインナーウェアに装着してください。
パッドを正しく装着しないと十分な衝撃吸収効果が得られない場合がありますのでご注意ください。

①ズボンを裏返すと、
内側にポケット有り

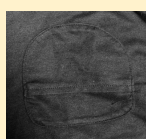

②パッドの上側を
ポケットに差し込む



③ポケットの下側に
差し込む



④左右2枚を同様に
装着



商品詳細は
こちら↓



希望小売価格
¥ 26,400(税込)

製造元 株式会社エナジーフロント
〒701-0212 岡山県岡山市南区内尾394-28
TEL: 086-250-6432 FAX: 086-250-6232
URL: <https://www.aun.blue>
E-mail: info@energyfront.jp

Facebook



大腿骨の出っ張り部分にピッタリと
当たることを確認してください。